



Sistema para el autocontrol de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre

Indicado para autodiagnóstico

MANUAL DE USO



Gracias por elegir el medidor GlucoMen® areo 2K. Este medidor compacto ha sido diseñado para que le sea más rápido y fácil medir la glucosa y los cuerpos cetónicos en sangre. Es nuestro deseo que este producto le ayude a controlar su diabetes. En este manual se explica cómo utilizar el medidor. Antes de efectuar un análisis, lea atentamente tanto este manual como los prospectos de las tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor y GlucoMen® areo β-Ketone Sensor, y de las soluciones de control GlucoMen® areo Control y GlucoMen® areo Ket Control. Preste especial atención a las advertencias y precauciones. Conserve este manual para consultarlo siempre que sea necesario. Ante cualquier duda o pregunta, solicite asistencia a A. Menarini Diagnostics (direcciones al final de este manual).

1. Uso previsto

El instrumento GlucoMen® areo 2K y las tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor y GlucoMen® areo β-Ketone Sensor son productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*; se utilizan para la medición cuantitativa de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre capilar fresca total. Están destinados al autodiagnóstico y control de los niveles de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre, tanto en el domicilio del paciente con diabetes como en un entorno hospitalario por parte de profesionales sanitarios. No deben utilizarse para diagnosticar diabetes o CAD (cetoacidosis diabética) ni para medir sangre de recién nacidos. No modifique su tratamiento basándose en los resultados de análisis efectuados con este medidor sin antes consultar con su médico o profesional sanitario.

2. Vista general del sistema

2.1 Medidor

FRENTE



RANURA TIRA REACTIVA
Inserte aquí la tira reactiva.

BOTÓN (⏻) INTRO

Mantenga presionado ⏻ dos segundos para acceder a la memoria del medidor (punto 6.1) o cuatro segundos para entrar en el modo de configuración cuando no se está efectuando un análisis (punto 7).

BOTONES (▲/▼) ARRIBA/ABAJO

Presione ▲ o ▼ o bien mantenga presionado para ver diferentes opciones o valores.

DORSO



BOTÓN DE EXPULSIÓN

Para expulsar la tira reactiva usada.

COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

Contiene dos pilas de botón de litio CR2032 3V.

PUERTO DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Puerto de conexión para cable de comunicación con PC y dispositivo Bluetooth de A. Menarini Diagnostics.

PANTALLA DEL MEDIDOR



ICONO MEMORIA:indica que se está utilizando la memoria (punto 6).

ICONO RELOJ/ALARMA: "reloj" aparece cuando se ajusta la hora (punto 7.1); "alarma", cuando se configuran los recordatorios acústicos y aparece en pantalla si hay alguna alarma activa (punto 7.2).

ICONOS HIPOGLUCEMIA/HIPERGLUCEMIA: aparecen cuando se configuran los niveles límite de hipoglucemia e hiperglucemia, y cuando el resultado de los análisis está por debajo o por encima de dichos valores (punto 7.4).

ICONO GOTA DE SANGRE: parpadea indicando que el medidor está listo para efectuar el análisis de sangre o de control (puntos 4.2, 4.3).

ÁREA PRINCIPAL DE LA PANTALLA:

.....muestra los resultados de los análisis, el valor de análisis archivados, los resultados promedio y los mensajes.

UNIDAD DE MEDIDA: muestra la unidad de medida en uso en su medidor (mg/dL o mmol/L para glucosa y no puede ser cambiada; para cuerpos cetónicos se utiliza únicamente la unidad mmol/L).

HORA: muestra la hora (HH:MM, formato 12h AM/PM o 24h).

PROMEDIO: muestra el período correspondiente al promedio en pantalla (1, 7, 14, 30, 60 y 90 días. Punto 6.2).

FECHA: muestra la fecha (formato DD-MM).

MARCADORES: estos iconos se muestran cuando se marca el resultado de un análisis (punto 4.4) o cuando se consulta un resultado marcado.

-  Marcador preprandial
-  Marcador posprandial
-  Marcador ejercicio
-  Marcador personalizable

ICONO GLUCOSA: aparece cuando el valor mostrado en el área principal de la pantalla se refiere a análisis de glucosa.

ICONO CUERPOS CETÓNICOS: aparece cuando el valor mostrado en el área principal de la pantalla se refiere a análisis de cuerpos cetónicos y también al configurar el nivel de alerta de cuerpos cetónicos. Si parpadea después de un análisis de glucosa, indica que es conveniente efectuar una medición de cuerpos cetónicos (punto 4.2).

ICONO TEMPERATURA INADECUADA: aparece durante un análisis si la temperatura está fuera de los límites permitidos.

ICONO PILA ESCASA: aparece cuando es necesario cambiar las pilas (punto 8.3).

ICONO NFC: se muestra cuando se configura la función NFC (Near field communication, punto 7.6) y cuando dicha función está habilitada; parpadea durante la transmisión de datos vía NFC (punto 6.3.1).

ICONO CTL: indica un análisis efectuado con solución de control (punto 4.3).

2.2 TIRA REACTIVA

En la siguiente figura se ilustra la estructura de las tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor y GlucoMen® areo β-Ketone Sensor. La tira GlucoMen® areo Sensor es blanca, mientras que la tira GlucoMen® areo β-Ketone Sensor es de color lila.



3. Antes del análisis

3.1 Precauciones al utilizar el medidor

La hora y la fecha ya están configuradas en el medidor. Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que ambas sean correctas y ajústelas si fuera necesario. Controle siempre las configuraciones después de cambiar las pilas (punto 8.3).

PRECAUCIÓN

- Para obtener resultados exactos, antes de efectuar un análisis de glucosa o cuerpos cetónicos, deje que el medidor, las tiras reactivas y las soluciones de control se adapten al ambiente durante 30 minutos.

Análisis de glucosa

- Temperatura: de 5 a 45 °C (41 - 113 °F);
- Humedad relativa: entre el 20 y el 90%.

Análisis de cuerpos cetónicos

- Temperatura: de 10 a 40 °C (50 - 104 °F);
- Humedad relativa: < 85%.

- No guarde ni utilice el medidor en lugares donde:
 - hay fuertes oscilaciones de temperatura;
 - el porcentaje de humedad es muy elevado y provoca condensación (cuartos de baño, cuartos de secado, cocinas, etc.);
 - hay un campo electromagnético fuerte (hornos microondas, teléfonos móviles, etc.).
- No utilice el medidor si se ha caído en un líquido o si han penetrado líquidos en él, aunque lo haya secado después.
- No toque con las manos la ranura donde se inserta la tira. En su interior hay un sensor térmico cuya función es reducir al mínimo los errores.
- No conecte el cable de comunicación al terminal de conexión mientras se está efectuando el análisis. Podría dañar el medidor y obtener resultados incorrectos.
- No aplique la sangre directamente en la ranura de inserción de la tira.
- No comparta con nadie su medidor para evitar el riesgo de infecciones.
- El medidor cumple con todos los requisitos de aplicación sobre emisiones electromagnéticas (EMC). Pese a ello, no efectúe mediciones cerca de dispositivos móviles o equipos eléctricos o electrónicos, porque los mismos son fuente de radiaciones electromagnéticas que podrían interferir con el funcionamiento correcto del medidor.

3.2 Precauciones de uso de las tiras reactivas

PRECAUCIÓN

- Utilice exclusivamente tiras GlucoMen® areo Sensor y GlucoMen® areo β-Ketone Sensor con el medidor GlucoMen® areo 2K. **No utilice** otras tiras reactivas porque obtendrá resultados inexactos.
- No utilice** las tiras reactivas después de la fecha de caducidad que aparece impresa en el frasco de las tiras reactivas para glucosa o en el blíster de las tiras reactivas para cuerpos cetónicos junto al símbolo .
- Para obtener resultados exactos, antes de efectuar un análisis de glucosa o cuerpos cetónicos, deje que el medidor y las tiras reactivas se adapten al ambiente durante 30 minutos.

Análisis de glucosa:

- Temperatura: de 5 a 45 °C (41 - 113 °F);
- Humedad relativa: entre el 20 y el 90%.

Análisis de cuerpos cetónicos:

- Temperatura: de 10 a 40 °C (50 - 104 °F);
- Humedad relativa: < 85%.

- No utilice** las tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor si han transcurrido más de nueve meses desde que abrió el envase por primera vez.
- Las tiras reactivas son de un solo uso. **No utilice** tiras reactivas que ya hayan absorbido sangre o solución de control.
- Conserve las tiras no utilizadas en su envase original; cierre bien y de inmediato el envase después de extraer una tira para mantener la calidad. **No las guarde** en ningún otro envase.

4. Medición de glucosa en sangre

4.1 Obtención de la muestra de sangre


Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de punción.

PRECAUCIÓN

- Lave la zona de punción con agua y jabón. Séquela bien antes de obtener la muestra de sangre.
- No comparta** la misma lanceta o el dispositivo de punción con nadie para evitar el riesgo de infección.
- Use siempre una lanceta nueva. Las lancetas son de un solo uso y **no deben** volver a utilizarse.

4.1.1 Sitios alternativos de punción

Este medidor puede analizar el nivel de glucosa en sangre extraída de la yema del dedo, la palma y el antebrazo. Sin embargo, los resultados de análisis con sangre de otros sitios pueden diferir respecto a los obtenidos con sangre de la yema del dedo. Consulte con su médico o profesional sanitario antes de analizar sangre extraída de la palma o del antebrazo.

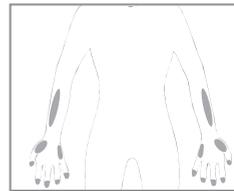

Utilice sangre de: Si efectúa el análisis:

Yema del dedo, palma, antebrazo	<ul style="list-style-type: none"> Antes de las comidas. Dos o más horas después de las comidas. Dos o más horas después del ejercicio físico.
Yema del dedo	<ul style="list-style-type: none"> Cuando exista la posibilidad de cambios rápidos en el nivel de glucosa en sangre (por ejemplo, después de las comidas o el ejercicio físico). Cuando experimente síntomas de hipoglucemia tales como transpiración, sudor frío, sensación de ingravidez o temblores. Cuando necesite un análisis inmediato porque advierte una hipoglucemia. Cuando no se encuentre en perfectas condiciones de salud (si tiene un resfriado, por ejemplo).

4.2 Realización del análisis de glucosa en sangre

1. Inserte una tira reactiva GlucoMen® areo Sensor (color blanco) en la ranura de inserción. **En la pantalla parpadea el símbolo de la gota de sangre y el icono Glu de glucosa aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.**

Si en la pantalla no aparece nada, extraiga la tira y vuelva a insertarla en la ranura; luego, espere hasta que empiece a parpadear el símbolo de gota de sangre.

2. Toque el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. Deje que la tira absorba sangre hasta que la ventana de control esté llena. Se oye un pitido (si está habilitado) y en la pantalla comienza la cuenta atrás.

NOTA

- Para obtener resultados exactos, toque la tira reactiva con la sangre menos de 20 segundos después de haber efectuado la punción.
- Use únicamente una gota entera y deseche sangre que se haya esparcido.
- No extienda** sangre en la tira reactiva.
- No presione** con fuerza la tira reactiva sobre el lugar de punción.
- No toque la tira reactiva una vez haya comenzado la cuenta atrás en el medidor.

3. Lea el resultado del análisis. Cuando el resultado del análisis aparece en la pantalla, acompañado del marcador de glucosa Glu, se oye un pitido.

PRECAUCIÓN

- **Si en la pantalla aparece "Lo" o "Hi":** Repita el análisis. Si sigue apareciendo "Lo" o "Hi", contacte con su médico o profesional sanitario. "Lo" aparece cuando el resultado del análisis es inferior a 20 mg/dL; "Hi", cuando es superior a 600 mg/dL.
- El icono de hipoglucemia o hiperglucemia puede aparecer según el límite que se ha configurado (punto 7.4).
- **Advertencia análisis cuerpos cetónicos.** Si su nivel de glucosa está por encima de un determinado límite (que es necesario configurar, ver punto 7.5), parpadeará el icono CUERPOS CETÓNICOS en la parte inferior izquierda de la pantalla, acompañado de un pitido intermitente, advirtiéndole de que es conveniente efectuar un análisis de cuerpos cetónicos en sangre.
- **Si el resultado del análisis no es compatible con los síntomas que experimenta:** verifique si ha efectuado correctamente el análisis, tal como se explica en el punto 4.2. Luego, efectúe una prueba de control de glucosa para comprobar que el sistema está funcionando correctamente (punto 4.3). Repita el análisis con sangre de la yema del dedo (no use sitios alternativos de punción). Si los resultados siguen sin coincidir con sus síntomas, consulte con su médico o profesional sanitario.
- **No ignore** los resultados del análisis. **No modifique** el control de la glucosa en sangre ni su tratamiento sin consultar antes con su médico o profesional sanitario, y respete sus indicaciones.

4. Presione el dispositivo de expulsión para sacar la tira. El medidor se apaga automáticamente.

PRECAUCIÓN

- Al sacar la tira usada, dirija el medidor hacia abajo y lejos de otras personas.
- **Eliminación de residuos de riesgo biológico**
Una vez utilizadas para analizar sangre, tanto las tiras como las lancetas se consideran residuos de riesgo biológico y deben eliminarse de conformidad con las normas sobre la materia vigentes en su lugar de residencia.

4.3 Análisis de control de glucosa

Efectúe una prueba con solución control en los siguientes casos:

- si sospecha que el medidor o las tiras GlucoMen® areo Sensor no están funcionando correctamente;
- si el medidor se ha caído;
- si el medidor ha sufrido daños;
- si los resultados del análisis de glucosa no son compatibles con los síntomas que experimenta;
- si quiere comprobar que el medidor y las tiras funcionan bien antes de utilizarlos por primera vez o antes de efectuar un análisis de glucosa en sangre.

NOTA

- Para la prueba con solución control del medidor y las tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor, utilice únicamente la solución de control GlucoMen® areo Control (se provee por separado).
- No utilice la solución de control GlucoMen® areo Ket Control para verificar el funcionamiento de las tiras GlucoMen® areo Sensor porque obtendrá resultados erróneos.

PRECAUCIÓN

- **No utilice** las soluciones de control después de la fecha de caducidad. La fecha está impresa en el frasco junto al símbolo .
- Antes de efectuar la prueba con solución de control, deje que tanto el medidor como la solución de control y las tiras se adapten durante 30 minutos a un ambiente con las características indicadas a continuación:
 - Temperatura: de 5 a 45 °C (41 - 113 °F);
 - Humedad relativa: entre el 20 y el 90%.
- No utilice las soluciones de control si ya han transcurrido tres meses desde que abrió el envase por primera vez.
- **No ingiera** la solución de control. No es para consumo humano.
- Evite el contacto de la solución de control con la piel y los ojos. Podría provocar inflamación por contacto.

Procedimiento para efectuar un análisis de control de glucosa.

1. Inserte una tira GlucoMen® areo Sensor nueva en la ranura del medidor.
En la pantalla parpadea el símbolo de la gota de sangre y en la parte inferior izquierda de la misma aparece el icono de glucosa Glu. Si en la pantalla no aparece nada, saque la tira y vuelva a insertarla en la ranura; aguarde a que parpadee el símbolo de la gota de sangre.
2. **Seleccione el icono de análisis de control** (ctl, punto 2.1).

ADVERTENCIA

- Si no selecciona el icono de control antes de efectuar el análisis con solución control, el resultado del mismo se almacenará como resultado de un análisis de sangre y se utilizará para calcular el promedio de resultados.
- **Seleccione siempre el icono de control antes de efectuar un análisis con solución de control; de lo contrario, los resultados podrían estar fuera de los límites aceptables. Para habilitar dicho icono, presione una vez uno de los botones ▲ / ▼ mientras en la pantalla parpadea el símbolo de la gota de sangre.**

3. Agite suavemente la solución de control antes del uso y descarte la primera gota. Aplique una gota de solución de control en una superficie dura, limpia y seca.

4. **Toque la gota de solución de control con el extremo de la tira reactiva** hasta que la ventana de control esté llena. Se oye un pitido (si está habilitado), y en la pantalla empieza la cuenta atrás.

NOTA

- El análisis no se efectúa si se aplica la solución de control directamente en la pantalla de control. El análisis comienza cuando el medidor detecta la solución de control y luego efectúa una cuenta atrás de 5 a 1.
- Cierre bien el frasco de solución de control.
- **No toque** la tira antes de que aparezcan los resultados.

5. **Verifique que los resultados estén dentro de los límites aceptables.**

Los límites aceptables están indicados en la etiqueta del envase de las tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor. Si los resultados están fuera de dichos límites, asegúrese de no haber cometido errores de procedimiento y repita la prueba con la solución de control.

PRECAUCIÓN

- Si los resultados siguen estando fuera de los límites aceptables, no utilice el medidor, las tiras ni la solución de control. Contacte con el Servicio de atención al cliente de A. Menarini Diagnostics

6. **Accione el botón de expulsión para sacar la tira reactiva.** El medidor se apaga.

4.4 Marcar los resultados de un análisis

Después de efectuar un análisis de sangre (no con solución control) con un resultado válido, éste puede marcarse del siguiente modo:

1. A partir del punto 3 del procedimiento de análisis de glucosa (resultado mostrado en pantalla, punto 4.2), presione  hasta que empiecen a parpadear los iconos de marcadores. Presione ▲ / ▼ para pasar los iconos (adelante o atrás) según el siguiente orden:

 Marcador preprandial.

 Marcador posprandial.

 Marcador de ejercicio.

 Marcador personalizable.

..... Vacío (se usa para deseleccionar los marcadores seleccionados con anterioridad).

2. Presione  para confirmar el marcador seleccionado. Puede seleccionar más de un marcador (solo uno si selecciona  o ) repitiendo los pasos 1 y 2.

3. Vuelva al punto 4 del procedimiento de análisis de glucosa (punto 4.2).

5. Medición de cuerpos cetónicos en sangre

5.1. Obtención de la muestra de sangre

Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de punción.

PRECAUCIÓN

- Lave la zona de punción con agua y jabón. Séquela bien antes de obtener la muestra de sangre.
- No comparta la misma lanceta o el dispositivo de punción con nadie para evitar el riesgo de infección.
- Use siempre una lanceta nueva. Las lancetas son de un solo uso y no deben volver a utilizarse.

Las tiras reactivas GlucoMen® areo β -Ketone Sensor no están diseñadas para ser usadas con sangre extraída de sitios alternativos de punción. Utilice únicamente sangre capilar fresca total extraída de la yema del dedo.

5.2. Realización del análisis de cuerpos cetónicos en sangre

1. Inserte una tira reactiva GlucoMen® areo β -Ketone Sensor (color lila) en la ranura de inserción. **En la pantalla parpadea el símbolo de gota de sangre** y el icono Ket de cuerpos cetónicos aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Si en la pantalla no aparece nada, extraiga la tira y vuelva a insertarla en la ranura; luego, aguarde hasta que empiece a parpadear el símbolo de gota de sangre.

- 2. Toque el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre** hasta que la ventana de control esté llena. Se oye un pitido (si está habilitado) y en la pantalla comienza la cuenta atrás.

NOTA

- Para obtener resultados exactos, toque la tira reactiva con la sangre menos de 20 segundos después de haber efectuado la punción.
- Use únicamente una gota entera y deseche sangre que se haya esparcido.
- No extienda sangre en la tira reactiva.
- No presione con fuerza la tira reactiva sobre el lugar de punción.
- No toque la tira reactiva una vez haya comenzado la cuenta atrás en el medidor.

- 3. Lea el resultado del análisis.** Cuando el resultado del análisis aparece en la pantalla, acompañado del marcador de cuerpos cetónicos Ket, se oye un pitido. El resultado del análisis parpadea hasta que el medidor se apaga.

PRECAUCIÓN

- **Si en la pantalla aparece "Lo" o "Hi":** "Lo" aparece cuando el resultado del análisis es inferior a 0,1 mmol/L y no es necesario tomar ninguna medida. "Hi" aparece cuando el resultado es superior a 8,0 mmol/L. Repita el análisis de cuerpos cetónicos de inmediato con una tira nueva. Si el resultado sigue siendo alto, consulte cuanto antes a su médico o profesional sanitario.
- **Si el resultado del análisis no es compatible con los síntomas que experimenta:** verifique si ha efectuado correctamente el análisis, tal como se explica en el punto 5.2. Si no ha cometido errores, efectúe una prueba de control de cuerpos cetónicos para comprobar que el sistema está funcionando correctamente (punto 5.3). Si el sistema funciona correctamente y los resultados siguen sin coincidir con sus síntomas, consulte con su médico o profesional sanitario.
- **No ignore** los resultados del análisis. No modifique su tratamiento basándose en los resultados de cuerpos cetónicos sin consultar antes con su médico o profesional sanitario.

- 4. Presione el botón de expulsión para sacar la tira.** El medidor se apaga.

PRECAUCIÓN

- Al sacar la tira usada, dirija el medidor hacia abajo y lejos de otras personas.
- **Eliminación de residuos de riesgo biológico**
Una vez utilizadas para analizar sangre, tanto las tiras como las lancetas se consideran residuos de riesgo biológico y deben eliminarse de conformidad con las normas sobre la materia vigentes en su lugar de residencia.

5.3. Análisis de control de cuerpos cetónicos

Efectúe una prueba de control en los siguientes casos:

- si sospecha que el medidor o las tiras GlucoMen® areo β -Ketone Sensor no están funcionando correctamente;
- si el medidor se ha caído;
- si el medidor ha sufrido daños;
- si los resultados del análisis de cuerpos cetónicos no son compatibles con los síntomas que experimenta.
- si quiere comprobar que el medidor y las tiras funcionan bien antes de utilizarlos por primera vez o siempre que quiera verificar su funcionamiento antes de efectuar un análisis de cuerpos cetónicos en sangre.

NOTA

- Para la prueba de control del medidor y las tiras GlucoMen® areo β -Ketone Sensor, utilice únicamente la solución de control GlucoMen® areo Ket Control (se provee por separado).
- No utilice la solución de control GlucoMen® areo Control para verificar el funcionamiento de las tiras reactivas GlucoMen® areo β -Ketone Sensor porque obtendrá resultados erróneos.

PRECAUCIÓN

- **No utilice** las soluciones de control después de la fecha de caducidad. La fecha está impresa en el frasco de la solución de control junto al símbolo .
- Antes de efectuar la prueba de control, deje que tanto el medidor como la solución de control y las tiras se adapten durante 30 minutos a un ambiente con las características indicadas a continuación.
 - Temperatura: entre 10 y 40 °C (50 - 104 °F)
 - Humedad relativa: < 85%
- No utilice las soluciones de control si ya han transcurrido tres meses desde que abrió el envase por primera vez.
- **No ingiera** la solución de control. No es para consumo humano.
- Evite el contacto de la solución de control con la piel y los ojos. Podría provocar inflamación por contacto.

Procedimiento para efectuar un análisis de control de cuerpos cetónicos.

1. Introduzca una tira GlucoMen® areo β -Ketone Sensor nueva en la ranura del medidor. **En la pantalla parpadea el símbolo de la gota de sangre** y en la parte inferior izquierda de la misma aparece el icono de cuerpos cetónicos Ket. Si en la pantalla no aparece nada, saque la tira y vuelva a insertarla en la ranura; aguarde a que parpadee el símbolo de la gota de sangre.
- 2. Seleccione el icono de análisis de control** (ctl, punto 2.1).

ADVERTENCIA

- Si no selecciona el icono de control antes de efectuar el análisis de control, el resultado del mismo se almacenará como resultado de un análisis de cuerpos cetónicos en sangre.
- Seleccione siempre el icono de control antes de efectuar un análisis con solución de control; de lo contrario, los resultados podrían estar fuera de los límites aceptables. Para habilitar dicho icono, presione una vez uno de los botones \blacktriangle / \blacktriangledown mientras en la pantalla parpadea el símbolo de la gota de sangre.

- 3.** Agite suavemente la solución de control antes del uso y descarte la primera gota. Aplique una gota de solución de control en una superficie dura, limpia y seca.

- 4. Toque la gota de solución de control con el extremo de la tira reactiva** hasta que la ventana de control esté llena. Se oye un pitido (si está habilitado), y en la pantalla empieza la cuenta atrás.

NOTA

- El análisis no se efectúa si se aplica la solución de control directamente en la ventana de control. El análisis comienza cuando el medidor detecta la solución de control y luego efectúa una cuenta atrás de 8 a 1.
- Cierre bien el frasco de solución de control.
- **No toque** la tira después de que se haya iniciado la cuenta atrás.

- 5. Verifique que los resultados estén dentro de los límites aceptables.**

Los límites aceptables están indicados en la etiqueta del blíster de las tiras reactivas GlucoMen® areo β -Ketone Sensor. Si los resultados están fuera de dichos límites, asegúrese de no haber cometido errores de procedimiento y repita la prueba con la solución de control.

PRECAUCIÓN

- Si los resultados siguen estando fuera de los límites aceptables, deje de utilizar el sistema y contacte con el Servicio de asistencia al cliente de A. Menarini Diagnostics.

- 6. Accione el botón de expulsión para sacar la tira reactiva.** El medidor se apaga.

6. Gestión de los resultados

ADVERTENCIA

Verifique que la hora y la fecha sean correctas antes de usar el sistema por primera vez y ajústelas si fuera necesario (punto 7.1). Si la hora y la fecha no son correctas, el medidor memorizará los resultados asignándoles hora y fecha erróneas.

6.1 Revisión de resultados anteriores de glucosa

Se pueden consultar los resultados guardados en la memoria. El medidor almacena hasta 730 resultados de análisis de glucosa con hora, fecha y marcadores.

1. Verifique que el medidor esté apagado (para apagarlo, mantenga presionado el botón  durante 3 segundos hasta que la pantalla se apague).
2. Encienda el medidor presionando 2 segundos el botón . Entre en el modo de consulta de memoria (en la pantalla aparece el icono "mem" y parpadea el icono Glu).
3. Presione el botón  para acceder a la memoria de resultados de glucosa.
4. El medidor muestra el resultado del análisis más reciente. También se muestra el icono Glu, la fecha y la hora del análisis y los correspondientes marcadores.
5. Presione los botones \blacktriangle o \blacktriangledown para pasar los resultados almacenados.
6. Para apagar el medidor, mantenga presionado el botón  5 segundos.

NOTA

- Si no hay resultados memorizados, la pantalla muestra "ooo".
- Una vez terminada la revisión de resultados individuales, la pantalla muestra "ooo".
- Manteniendo presionado el botón \blacktriangle o \blacktriangledown , los resultados se consultan más rápidamente.

6.2 Visualización del promedio de resultados de glucosa

El medidor muestra el promedio de resultados de los análisis de glucosa en los períodos programados (1, 7, 14, 30, 60 y 90 días).

1. Consulte los pasos 1, 2 y 3 del punto 6.1.
2. Presione el botón  para acceder al modo promedio (en la pantalla parpadea el icono "AVG").

- La pantalla muestra el promedio de 1 día.
- Presione el botón para ver los diferentes promedios.
- Una vez consultado el promedio de 90 días, presione para volver al modo de consulta de la memoria (paso 3 del punto 6.1).
- Mantenga presionado durante 5 segundos para apagar el medidor.

NOTA

- Si en la memoria hay menos de 2 resultados para el período consultado, la pantalla muestra "ooo". Lo mismo en caso de no haber resultados memorizados.
- La función promedio iguala los resultados HI al valor de 600 mg/dL y los resultados LO al valor de 20 mg/dL.



6.3 Revisión de resultados anteriores de cuerpos cetónicos

Se pueden consultar los resultados guardados en la memoria. El medidor almacena hasta 100 resultados de análisis de cuerpos cetónicos con hora, fecha y marcadores.

- Verifique que el medidor esté apagado (para apagarlo, mantenga presionado durante 3 segundos hasta que la pantalla se apague).
- Encienda el medidor presionando 2 segundos el botón . Entre en el modo de consulta de memoria (en la pantalla aparece el icono "mem" y parpadea el icono Glu).
- Presione los botones o para pasar a la memoria de resultados de cuerpos cetónicos (Ket parpadea en la pantalla).
- Presione para entrar en la memoria de resultados de cuerpos cetónicos.
- El medidor muestra el resultado del análisis más reciente. También muestra el icono Ket, la fecha y la hora del análisis y el correspondiente marcador (para la medición de cuerpos cetónicos, únicamente el marcador ctt).
- Presione los botones o para consultar los resultados almacenados.
- Para apagar el medidor, mantenga presionado el botón durante 5 segundos.

NOTA

- Si no hay resultados memorizados, la pantalla muestra "ooo".
- Una vez terminada la revisión de resultados individuales, la pantalla muestra "ooo".
- Manteniendo presionado el botón o , los resultados se consultan más rápidamente.
- Para pasar de los resultados de cuerpos cetónicos a los de glucosa y viceversa mientras se consultan los datos, presione durante 3 segundos para volver a la selección de memoria "Glu"/"Ket".

6.4 Transmisión de datos

Los datos almacenados en la memoria del medidor GlucoMen® areo 2K pueden transmitirse a los software y las aplicaciones GlucoLog® y MenaDiab® tanto a través de NFC, de un cable de comunicación o de un dispositivo Bluetooth distribuidos únicamente por A. Menarini Diagnostics.

NOTA

- Los software y las aplicaciones GlucoLog® y MenaDiab® y los dispositivos Bluetooth se proveen por separado. Consulte en los respectivos manuales de uso las instrucciones para descargar datos.

6.4.1 Transmisión NFC

Para transmitir datos mediante NFC, es necesario activar la función NFC en el medidor GlucoMen® areo 2K (punto 7.6) y disponer de un dispositivo equipado con NFC (un smartphone, por ejemplo) con aplicaciones GlucoLog® y MenaDiab® Mobile.

- Active la transmisión NFC en la aplicación GlucoLog® o MenaDiab® Mobile del dispositivo equipado con NFC.
- Acerque (< 1 cm) la antena NFC del medidor GlucoMen® areo 2K a la antena NFC del dispositivo.

NOTA

- Los datos se transmiten aunque el medidor esté apagado o en modo de consulta de memoria.


- La transmisión de datos comienza automáticamente (el medidor GlucoMen® areo 2K se enciende y en la pantalla parpadea el icono).
- Una vez completada la transmisión de datos, en la pantalla del medidor GlucoMen® areo 2K aparece "End" (junto con el icono) y se oye un pitido una sola vez.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar el medidor.

ADVERTENCIA

- La transmisión de datos mediante NFC puede disminuir la duración de las pilas.

7. Configuración del medidor

- Asegúrese de que el medidor esté apagado (para apagarlo mantenga presionado el botón durante 3 segundos hasta que la pantalla se apague).
- Presione durante 4 segundos para acceder al menú de configuración.
- Presione los botones o para pasar los diferentes menús de configuración (ver figuras más abajo) y presione para entrar en cada uno de los menús.

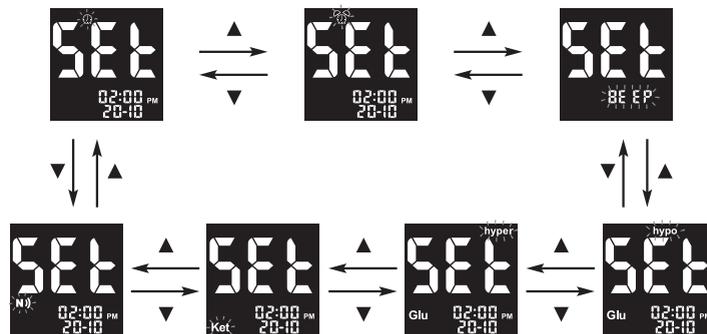

NOTA

- En cualquier momento, durante la configuración, se puede presionar el botón para salir, o bien insertar una tira reactiva para efectuar un análisis. El medidor memoriza las modificaciones introducidas hasta ese momento.

7.1 Configuración de la fecha y la hora

Mediante los botones o , seleccione el valor correcto. Presione para confirmar y pasar al dato siguiente: año, mes, día, formato de la hora (12h, 24h), hora, minutos. Confirme los minutos presionando y vuelva a los menús de configuración (paso iii, punto 7).

NOTA

- El formato de la fecha es DD-MM.

7.2 Configuración de la alarma

Se pueden programar hasta seis alarmas en el medidor GlucoMen® areo 2K: tres como recordatorios de análisis de glucosa y tres como recordatorios de análisis de cuerpos cetónicos. A la hora programada, el medidor emite un sonido durante 30 segundos.

NOTA

- Presione o inserte una tira reactiva para silenciar la alarma (la alarma queda programada).

PRECAUCIÓN

- Antes de programar una alarma, asegúrese de que la hora es correcta.

- En la pantalla parpadean simultáneamente los iconos de alarma y Glu. Presione o para pasar de la sección alarmas de glucosa (parpadea Glu) a la de cuerpos cetónicos (parpadea Ket). Presione para confirmar la selección y pasar al punto siguiente. En los pasos sucesivos, se mostrará el icono Glu o el icono Ket indicando la sección de alarma seleccionada.
- La pantalla muestra el estado de la alarma 1 (la configuración por defecto es OFF). Puede activarla mediante los botones o . Para confirmar la selección e ir al paso sucesivo, presione .
- Presione o para marcar la hora. Para confirmar la selección e ir al paso sucesivo, presione .
- Presione o para marcar los minutos. Para confirmar la selección y pasar a la programación de la alarma 2, presione .
- Programa la alarma 2 y la alarma 3 como se indica en los puntos 2 y 3. Una vez programadas todas las alarmas, presione para volver a los menús de configuración (paso iii, punto 7).

NOTA

- La alarma tendrá el mismo formato (12h, 24h) de la hora.
- Las alarmas programadas no se borran al cambiar las pilas.

7.3 Configuración del pitido

En el medidor GlucoMen® areo 2K, esta función está configurada por defecto en ON. Se puede regular el pitido como sigue:

- Presione o para activar o desactivar el pitido (ON / OFF).
- Presione para confirmar y volver a los menús de configuración (paso iii, punto 7).

ADVERTENCIA

- Silenciando la señal acústica, se perderán informaciones importantes del medidor, como la confirmación de una acción o los mensajes de error.

7.4 Configuración de alarmas de hipoglucemia e hiperglucemia

Gracias a la función de alarma del medidor GlucoMen® areo 2K, se pueden configurar los niveles personales altos (hiperglucemia) y bajos (hipoglucemia) de glucosa en sangre. En función de los valores configurados, en la pantalla aparece "hypo" o "hyper" según si los resultados de sus análisis de glucosa en sangre están por debajo de sus valores límite bajos o por encima de sus valores límite altos.

ADVERTENCIA

- Consulte con su médico o profesional sanitario para programar los valores de hipoglucemia y de hiperglucemia indicados para usted.
- No altere ni suspenda su tratamiento basándose en esta función; consulte siempre con su médico o profesional sanitario antes de modificar o suspender el tratamiento.

Las alarmas de hipoglucemia e hiperglucemia del medidor GlucoMen® areo 2K están configuradas por defecto en OFF. Para configurar los valores límite de hipoglucemia e hiperglucemia, proceda de este modo:

1. Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar la alarma "hypo" (ON/OFF).
2. Presione  para configurar el valor de alarma de hipoglucemia (en ON).
3. Presione ▲ o ▼ para seleccionar el valor que desee. Manteniendo presionado ▲ o ▼ los números pasan más rápidamente.
4. Presione  para confirmar la selección y pasar a la configuración de alarma de hiperglucemia.
5. Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar la alarma "hyper" (ON/OFF).
6. Presione  para configurar el valor de alarma de hiperglucemia (en ON).
7. Presione ▲ o ▼ para seleccionar el valor que desee. Manteniendo presionado ▲ o ▼ los números pasan más rápidamente.
8. Presione  para confirmar la selección y volver a los menús de configuración (paso iii, punto 7).

7.5 Configuración advertencia análisis de cuerpos cetónicos

El medidor de glucosa y cuerpos cetónicos GlucoMen® areo 2K dispone de una función adicional que permite configurar un determinado nivel de glucosa en sangre a partir del cual el instrumento advierte al usuario de que es conveniente efectuar un análisis de cuerpos cetónicos. Cuando esta función está activada, si la glucosa en sangre es superior al límite configurado, en la pantalla parpadea el icono Ket y el instrumento emite un pitido intermitente avisando de que es aconsejable efectuar un análisis de cuerpos cetónicos en sangre.

ADVERTENCIA

- Consulte con su médico o profesional sanitario para programar los valores de la función advertencia de análisis de cuerpos cetónicos.
- No altere ni suspenda su tratamiento basándose en esta función; consulte siempre con su médico o profesional sanitario antes de modificar o suspender el tratamiento.

La función de advertencia de análisis de cuerpos cetónicos del medidor GlucoMen® areo 2K está configurada por defecto en OFF. Para configurar el valor límite de esta función, proceda de este modo:

1. Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar la función advertencia de análisis de cuerpos cetónicos (ON/OFF).
2. Presione  para configurar el valor límite de glucosa en sangre (si la función advertencia de cuerpos cetónicos está en ON).
3. Presione ▲ o ▼ para seleccionar el valor que desee (configuración inicial: 200 mg/dL). Manteniendo presionado ▲ o ▼ los números pasan más rápidamente.
4. Presione  para confirmar la selección y volver a los menús de configuración (paso iii, punto 7).

7.6 Configuración de NFC

La función NFC del medidor GlucoMen® areo 2K está configurada por defecto en OFF y puede ser habilitada procediendo del siguiente modo:

1. Presione ▲ o ▼ para seleccionar ON u OFF.
2. Presione  para confirmar y salir.

8. Mantenimiento del medidor

8.1 Guardar el medidor

Después del uso, cierre bien los tapones del envase de tiras reactivas y del frasco de solución de control para mantener su calidad. Coloque el medidor, las tiras, las soluciones de control y los manuales en su estuche y guárdelo en un lugar seco. La temperatura adecuada de conservación está entre -20 y 50 °C (-4 - 122 °F) para el medidor, y entre 4 y 30 °C (39,2 - 86 °F) para las tiras reactivas y las soluciones de control. **No congele** estos materiales. Evite el calor, la humedad y los rayos directos del sol.

PRECAUCIÓN

Para obtener resultados precisos:

- **No utilice** tiras o soluciones de control cuyos envases estén rotos o hayan quedado abiertos.
- **No utilice** las tiras o las soluciones de control después de sus respectivas fechas de caducidad o fechas límite de uso.

8.2 Limpieza del medidor

El medidor no requiere una limpieza especial. Si se ensucia, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.

Para desinfectar el medidor después de la limpieza, utilice un paño suave humedecido con una solución de etanol al 75% o una dilución de lejía de uso doméstico (solución de hipoclorito de sodio al 10%).

8.3 Cambio de las pilas

Cuando en pantalla aparece el símbolo de pila escasa , indica que las mismas se están agotando. Cámbielas antes de usar nuevamente el medidor. Los resultados anteriores permanecen en la memoria aunque se cambien las pilas. El medidor utiliza dos pilas de botón de litio CR2032 3V de venta en comercios. Tenga siempre al alcance de la mano pilas de repuesto. No necesitará ajustar la fecha y la hora si coloca las pilas nuevas antes de 2 minutos de haber extraído las viejas.

Para cambiar las pilas:

1. Asegúrese de que el medidor está apagado.
2. Abra el compartimento de las pilas deslizando la tapa.
3. Extraiga las pilas.
4. Coloque las pilas nuevas con la cara marcada "+" hacia arriba.
5. Cierre el compartimento de las pilas.

ADVERTENCIA

- Si coloca las pilas al revés, el medidor no funciona.
- El reloj del medidor se parará si toca las partes internas de metal con las manos o con objetos metálicos.
- Si tarda más de dos minutos en colocar las pilas nuevas y luego no ajusta la hora y la fecha, los resultados de los análisis efectuados con posterioridad se guardarán con fecha y hora incorrectas.



Elimine las pilas usadas de conformidad con las normas de protección del medio ambiente vigentes en su localidad.

9. Resolución de problemas


9.1. Mensajes HI y LO




Si el resultado del análisis de glucosa es superior a 600 mg/dL, en la pantalla aparece HI.



Si el resultado del análisis de glucosa es inferior a 20 mg/dL, en la pantalla aparece LO.

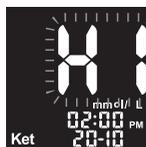

Si el resultado del análisis de cuerpos cetónicos es superior a 8 mmol/L, en la pantalla parpadea el icono HI.

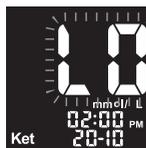

Si el resultado del análisis de cuerpos cetónicos es inferior a 0,1 mmol/L, en la pantalla parpadea el icono LO.

ADVERTENCIA

- Si después de un análisis de glucosa aparece el mensaje HI o LO, consulte con su médico o profesional sanitario antes de modificar su tratamiento.
- Si después de un análisis de cuerpos cetónicos aparece el mensaje HI, consulte con su médico o profesional sanitario antes de modificar su tratamiento.
- Si aparecen con frecuencia mensajes HI o LO, pero su médico considera que no guardan relación con su estado de salud, contacte con el Servicio de atención al cliente de A. Menarini Diagnostics.

9.2. Mensajes de error



Error del hardware del sistema. Saque las pilas y vuelva a colocarlas para reiniciar el medidor, y repita el análisis con una tira nueva. Si el problema subsiste, contacte con el Servicio de atención al cliente de A. Menarini Diagnostics.



La tira reactiva está dañada o ha sido usada; la sangre ha sido aplicada antes de que parpadeara el icono "aplicar sangre" en la pantalla. Saque la tira usada y repita el análisis con una tira nueva. Antes de empezar, aguarde hasta que en la pantalla parpadee el icono de la gota de sangre.



Error en la muestra de sangre. La sangre no ha llenado el área de la tira porque no la aplicó correctamente o el volumen era insuficiente. Repita el análisis con una tira nueva efectuando una correcta punción en el dedo (punto 4.1).



Se sacó o movió la tira durante la cuenta atrás. Repita el análisis con una nueva tira.



NFC se ha desconectado durante la transmisión. Repita la transmisión NFC. Si el problema subsiste, contacte con el Servicio de atención al cliente.



Pilas escasas. Cambie las pilas siguiendo las instrucciones del punto 7.3.



La temperatura no está dentro de los límites indicados. Repita la medición después de 30 minutos como mínimo, cuando se haya alcanzado la temperatura de trabajo.

9.3. Resultados inesperados de glucosa

Si los resultados del análisis de glucosa no son los habituales, comparados con los resultados anteriores, o no son compatibles con los síntomas que usted experimenta:

1. Repita la medición con una tira reactiva nueva (punto 4.2).
2. Efectúe una prueba de control con la solución de control GlucoMen® areo Control (punto 4.2).
3. Repita la medición utilizando una tira tomada de un envase nuevo de tiras reactivas GlucoMen® areo Sensor (punto 4.2).
4. Si sigue teniendo dudas acerca de los resultados del análisis, consulte con su médico o profesional sanitario.

⚠ ADVERTENCIA

- Ante un resultado inesperado, consulte con su médico o profesional sanitario antes de modificar su tratamiento.
- Si los resultados de los análisis siguen siendo inusuales, contacte con el Servicio de atención al cliente de A. Menarini Diagnostics.

9.4. Resultados inesperados de cuerpos cetónicos

Si los resultados no son los habituales, comparados con los resultados anteriores, que usted experimenta:

1. Repita la medición con una tira reactiva nueva (punto 5.2).
2. Efectúe una prueba de control con la solución de control GlucoMen® areo Ket Control (punto 5.3).
3. Repita la medición con una nueva tira reactiva tomada de un envase diferente (punto 5.2).
4. Si sigue teniendo dudas acerca de los resultados del análisis, consulte con su médico o profesional sanitario.

⚠ ADVERTENCIA

- Ante un resultado inesperado, consulte con su médico o profesional sanitario antes de modificar su tratamiento.
- Si los resultados de los análisis siguen siendo inusuales, contacte con el Servicio de atención al cliente de A. Menarini Diagnostics.

10. Datos técnicos

Datos generales

Producto	GlucoMen® areo 2K
Fabricante	A. Menarini Diagnostics srl
Parámetros de análisis	Nivel de glucosa en sangre; nivel de cuerpos cetónicos en sangre
Código tiras reactivas	No se requiere código (autocalibración)
Muestra	Sangre capilar fresca total
Compensación de temperatura	Compensación automática mediante sensor térmico incorporado
Pilas	Dos pilas de litio 3V (CR2032)
Duración de las pilas	Por lo menos 1.000 análisis o aproximadamente un año (3 análisis por día)
Capacidad de memoria	730 resultados de glucosa y 100 de cuerpos cetónicos con marcadores, fecha y hora. Al llegar a estas cantidades, los resultados nuevos sobrescriben los más viejos
Gestión de datos	Marcadores para antes y después de las comidas, para ejercicio y marcador de verificación
Alarmas	Hasta seis alarmas acústicas programables (3 para medición de glucosa y 3 para medición de cuerpos cetónicos)
Transmisión de datos	A través de cable de transmisión, NFC o dispositivo Bluetooth
Promedios	De 1, 7, 14, 30, 60 y 90 días (solo para resultados de glucosa)
Apagado automático	- Después de 60 segundos de inactividad antes del análisis (con tira insertada en el medidor e icono gota de sangre parpadeando). - Después de 45 segundos de inactividad después del análisis y con mensajes de error Err2, Err3, Err4, HI y LO. - Después de 5 segundos con mensajes de error Err1, Err5, icono de temperatura e icono de pilas.
Medidas	85,5 mm (L) x 56 mm (W) x 18,2 mm (H)
Peso	46 g (sin pilas)
Condiciones de trabajo del medidor	- Temperatura: entre 5 y 45 °C (41 - 113 °F) para análisis de glucosa; entre 10 y 40 °C (50 - 104 °F) para análisis de cuerpos cetónicos. - Humedad relativa: entre 20 y 90% (sin condensación) para análisis de glucosa; < 85% para cuerpos cetónicos.
Condiciones de almacenamiento del medidor	- Temperatura: entre -20 y 50 °C (-4 - 122 °F). - Humedad relativa: entre 20 y 90%. Temperatura de conservación de las soluciones de control: 4 - 30 °C (39,2 - 86 °F).
Entorno operativo	El medidor cumple con todos los requisitos de aplicación sobre emisiones electromagnéticas (EMC)
Clasificación directiva UE	98/79/CE / Anexo II, Lista B
Estándar del dispositivo	ISO 15197:2003 y requisitos complementarios introducidos por la norma ISO 15197:2013

Datos de medición de glucosa

Unidad de medida	mg/dL
Límites del análisis	20 - 600 mg/dL
Límites del hematocrito	10 - 70% (hematocrito compensado)
Tiras reactivas	GlucoMen® areo Sensor
Medida de la muestra	Mínimo 0,5 µL

Duración del análisis	5 segundos
Método de análisis	Electroquímico, basado en glucosa oxidasa (obtenida de <i>Aspergillus niger</i>). Mediador: ion hexacianoferrato(III)
Calibración y trazabilidad	Los resultados equivalen a la concentración de glucosa en plasma (con referencia a plasma capilar). El sistema GlucoMen® areo 2K está calibrado frente a valores de referencia de plasma capilar determinados con un analizador YSI. El analizador YSI se calibra (como procedimiento de medición secundaria de referencia) utilizando una serie de estándares YSI (calibradores primarios) que se refieren directamente al NIST (National Institute of Standards and Technology, USA)
Condiciones de conservación de las tiras	- Temperatura: 4 - 30 °C (39,2 - 86 °F) válida tanto para el envase sin abrir como después de abierto. - Humedad relativa: 20 - 90 % válida tanto para el envase sin abrir como después de abierto.

Datos de medición de cuerpos cetónicos

Unidad de medida	mmol/L
Límites del análisis	0,1 - 8,0 mmol/L
Límites del hematocrito	20 - 60% (hematocrito compensado)
Tiras reactivas	GlucoMen® areo β-Ketone Sensor
Medida de la muestra	Mínimo 0,8 µL
Duración del análisis	8 segundos
Método de análisis	Electroquímico, basado en β-hidroxibutirato deshidrogenasa. Mediador: 1,10-fenantrolina-5,6-dion
Calibración y trazabilidad	El sistema GlucoMen® areo 2K está calibrado frente a valores de referencia de plasma capilar determinados mediante el procedimiento Stanbio β-Hydroxybutyrate LiquiColor® Procedure No. 2440 (Stanbio Laboratory, 1261 North Main Street, Boerne, Texas 78006). El analizador utilizado para el kit Stanbio (procedimiento de medición secundaria de referencia) se calibra utilizando una serie de estándares de β-hidroxibutirato (calibradores primarios) preparados gravimétricamente en el Stanbio Laboratory
Condiciones de conservación de las tiras	Temperatura: 4 - 30 °C (39,2 - 86 °F)

11. Garantía

El medidor GlucoMen® areo 2K está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra (con las excepciones indicadas más abajo). Si, durante los dos primeros años, el medidor GlucoMen® areo 2K no funcionara por cualquier motivo (excepto los indicados más abajo), será reemplazado sin cargo por un nuevo medidor o por otro equivalente. Si desea prolongar el período de garantía de su medidor, consulte la tarjeta de garantía.

Esta garantía está sujeta a las siguientes excepciones y limitaciones:

- la garantía se aplica únicamente al comprador original;
- la garantía no cubre el mal funcionamiento o los daños causados por alteraciones evidentes, uso inadecuado, modificaciones, negligencia, mantenimiento no autorizado o uso del medidor sin respetar las instrucciones.
- no existe ninguna otra garantía expresa para este producto. La sustitución del instrumento mencionada más arriba es la única obligación que el garante asume en esta garantía.

El comprador original deberá contactar con A. Menarini Diagnostics llamando al número Tel. 900-301-334 / +34-935071000.

A. Menarini Diagnostics se compromete a utilizar su información de carácter personal de manera responsable y en el respeto de las disposiciones de ley. Le garantizamos que no revelaremos ni venderemos su información de carácter personal a terceros. La información que usted nos suministre voluntariamente nos permitirá servirle mejor en el futuro.

12. Símbolos y abreviaturas

	Consulte las instrucciones de uso
	Precaución, consulte las instrucciones de uso
	Temperatura de conservación
	Fecha de caducidad
	Fabricante
	Código de lote
	Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Producto para autodiagnóstico <i>in vitro</i>
	Número de serie
	Embalaje reciclable
	Marca CE
	Riesgo de contaminación por uso de muestras de sangre
	Medidor de glucosa en sangre
	Cambios o agregados importantes con respecto a la revisión anterior del presente manual
	Corriente continua (voltaje)
	Número de referencia

El medidor cumple con los requisitos de la directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y con los requisitos de la directiva 98/79/EC sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*.



A. Menarini Diagnostics S.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze - Italia



Distribuido por:
A. MENARINI DIAGNOSTICS
Avda. del Maresme, 120
08918 Badalona - Barcelona - España
Tel. 900-301-334 / +34-935071000
Fax +34-93-2780215

www.menarinidiag.es
www.solucionesparaladiabetes.com

Fecha de emisión: octubre de 2015

GlucoMen® areo 2K
Fabricado en Taiwán

GlucoMen® areo Sensor, GlucoMen® areo β-Ketone Sensor,
GlucoMen® areo Control and GlucoMen® areo Ket Control.
Consulte las instrucciones de uso.

A.MENARINI
diagnostics